


Touches de fonctions



Utilisation

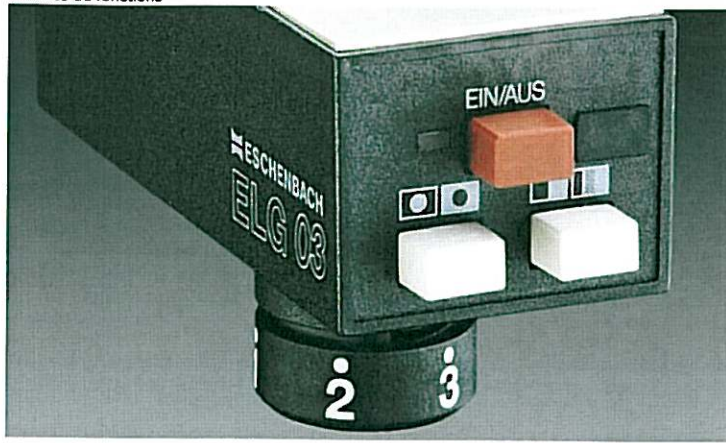

Réglage



Touches de fonctions

ELG 04 couleur

MADE IN GERMANY

Nous avons renoncé volontairement aux éléments de commande superflus sur le ELG 04 couleur pour conserver la commande aussi simple que possible, particulièrement pour son groupe principal d'utilisateurs, les personnes âgées, et ainsi augmenter l'acceptance de travailler avec le ELG.

Utilisation:

L'appareil de lecture électronique ELG 04 couleur a été conçu pour les mal-voyants. Ces personnes ont une vitesse de lecture lente et l'usage de l'appareil est quotidien.

Caractéristiques:

- L'appareil de lecture électronique ELG 04 couleur peut être raccordé avec un seul câble à la prise Euro-AV (prise PERITEL) présente sur chaque téléviseur.
- Manipulation simple grâce au minimum d'éléments de commande
- Commutation sur positif/négatif en mode noir et blanc
- Représentation fortement contrastée, aussi en mode couleurs
- Le grossissement de l'écran est d'env. 5x à 70x, selon la diagonale de l'écran du téléviseur utilisé
- Une lentille emboîtable permet de réduire le grossissement pour regarder les images en format 9 x 13 mm.

Caractéristiques techniques:

- Modes couleurs et noir et blanc
- Commutation inverse
- Zone du champ visuel: env. 20 x 16 mm à 60 x 48 mm
- Capteur CCD 1/3 pouce
- Dimensions (lxHxP): 430 x 430 x 410 mm
- Largeur de planche de base: Format A3, appui 430 x 320 mm
- Poids: 7,85 kg
- Alimentation électrique par transfo
- Longueur de câble: env. 3 m