

PRODUITS

Mobilité

Easy Rider

Système de Commande

Modules d'extension

Communication

Ordinateur

Contrôle de l'environnement


Contacteurs

concernant HMC nv

CONTACT

AUTRES LANGUES

ISO-Joystick

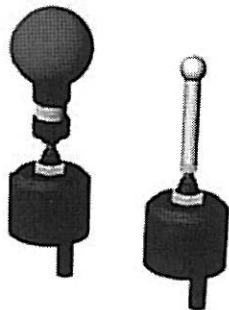

Le ISO Joystick est également un joystick très petit et compact dont la sensibilité et l'amplitude de mouvement, peuvent être programmés.

- Autant l'amplitude que la sensibilité peuvent être individuellement programmés. Ce qui peut permettre de « coller » au mieux aux besoins individuels de la personne.
- De par ses dimensions compactes il peut trouver sa place au milieu d'une tablette en plexi mais c'est surtout en tant que « conduite menton » qu'on le rencontrera. De par ses propriétés spécifiques, le ISO Joystick prend tout naturellement sa place dans la gamme de HMC International. Il se positionne entre le Mini Joystick et le Joystick HMC Compact, également utilisé pour la conduite au menton.
- En appliquant une pression au sommet de la boule du joystick, l'utilisateur peut générer un « clic ». Ce « clic » peut être assimilé à un clic de fonction, lorsqu'on se trouve en mode « rouler voiturette » ou dans tout autre menu de l'Easy-Rider. Il peut également être assimilé au « clic » de la souris dans le menu adéquat. Cette possibilité est intéressante pour les personnes dont le contrôle est optimal mais dont la force est limitée. Il est toutefois possible de supprimer, électroniquement, cette caractéristique.

<<retour>>

© Copyright 2005 HMC nv.

