



Yes, you can.®

Invacare® **Flo-tech Lite Visco & Contour Visco**

NOUVEAU

Les coussins **Flo-tech Lite Visco & Contour Visco** ont été conçus pour apporter le meilleur confort au patient tout en assurant une excellente prévention d'escarre.

Le design des coussins **Flo-tech** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant: **Découpe Toile d'assise** pour compenser l'effet Hamac, **Découpe Tube de dossier** pour maximiser la profondeur du fauteuil.

Composés de mousse viscoélastique, les coussins **Flo-tech Lite Visco & Contour Visco** sont des coussins de classe 2 disponibles dans une large gamme de tailles pour pouvoir s'adapter à tous les patients à risque d'escarre moyen à élevé assis plus de 10 heures par jour sur un fauteuil.



Flo-tech Contour Visco



Flo-tech Lite Visco



Flo-tech Contour Visco
pour fauteuil de confort



➤ Conception originale!



Les coussins **Flo-tech Lite Visco et Contour Visco** sont composés d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, entre autres chez des patients obèses ou très maigres ayant des saillies osseuses. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.

➤ De multiples découpes pour toujours plus de confort!




Les coussins **Flo-tech Visco** sont disponibles dans 3 formes différentes

- **Lite Visco:** Hauteur de 5.5 cm
- **Contour Visco:** Hauteur de 9 cm
- **Contour Visco** pour fauteuil de confort: Hauteur de 9 cm et Profondeur de 53 cm.

Les coussins **Lite Visco et Contour Visco** sont équipés d'une découpe Toile d'assise pour compenser l'effet Hamac de la Toile.

Tous les coussins **Lite Visco, Contour Visco et Contour Visco** pour fauteuil de confort ont enfin une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil et un galbe pour assurer un bon positionnement du patient avec plot d'abduction pour limiter le glissement vers l'avant et un soutien latéral.

➤ Différentes portances adaptées au poids du patient

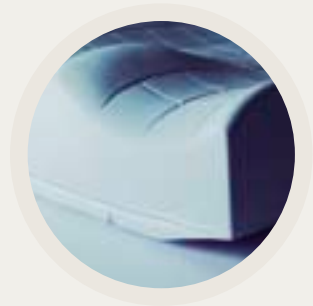

Les coussins **Flo-tech Lite Visco et Contour Visco** sont disponibles en plusieurs portances adaptées au poids du patient: Ferme, Très ferme.

➤ Matériaux de haute qualité



Les coussins **Flo-tech Lite Visco et Contour Visco** sont composés de matériaux de qualité: la mousse est thermosensible et utilisée avec la housse, elle s'adapte ainsi à la température du corps du patient pour limiter les effets de sudation et maximiser la prévention d'escarre.

La mousse et les housses de nos coussins sont conformes aux réglementations feux en vigueur EN 597 partie 1 et partie 2.

➤ Homologation en Classe 2

Les coussins **Flo-tech Lite Visco et Contour Visco** sont inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables selon le Journal Officiel du 29 Janvier 2008.

Code	Désignation	Tarif (en euros TTC)	PLV (en euros TTC)
1223452	Escarres, coussin viscoélastique, classe II, <i>Invacare</i> ®, Flo-tech Lite Visco	102,50	102,50
1243510	Escarres, coussin viscoélastique, classe II, <i>Invacare</i> ®, Flo-tech Contour Visco	102,50	102,50

➤ Housses de haute qualité



Housse **Dartex**


La housse **Dartex** est une housse respirante, bi-extensible et déperlante: le liquide ne s'imprègne pas dans la housse ce qui limite les effets de macération. Cette housse est équipée d'une base anti-dérapante pour éviter le glissement du coussin sur le support.

La housse **PU** est une housse de rechange imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau et bi-extensible.

Les 2 housses **Dartex** et **PU** sont livrées directement sur le coussin, elles sont biocompatibles et conformes aux réglementations feux EN 597 parties 1 et 2. La housse **Dartex** est lavable en machine jusqu'à 80°C et séchable par tambour jusqu'à 60°C. Pour le nettoyage quotidien, nous vous recommandons l'utilisation de lingettes désinfectantes non chlorées.




Housse **PU**

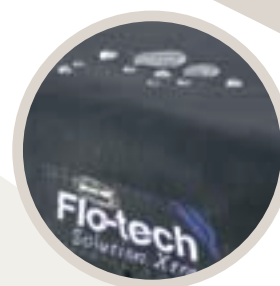

Housse **Dartex** déperlante

➤ Mesures de pression

Répartition des pressions pour un patient de 65 kg mesurant 170 cm

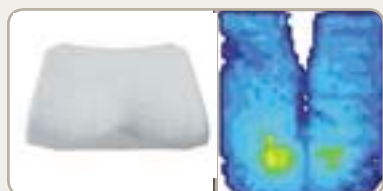


Coussin Lite Visco Ferme
Pression Max = 155 mmHg
Surface de contact = 1306 cm²



Coussin Contour Visco Ferme
Pression Max = 120 mmHg
Surface de contact = 1315 cm²

➤ Modèle adapté aux fauteuils de confort Azalea® et Clematis®

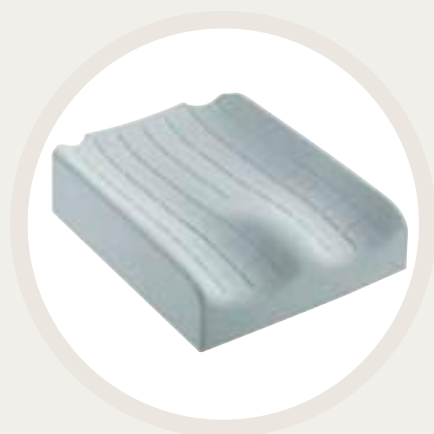

Le coussin **Contour Visco** est disponible avec une découpe spécifique pour les fauteuils de confort avec 4 tailles disponibles et une portance ferme.

La découpe du coussin est droite pour s'adapter au mieux aux assises rigides.

Ce coussin est disponible en 4 tailles: 35.5 cm x 53 cm, 40.5 cm x 53 cm, 45.5 cm x 53 cm, 50.5 cm x 53 cm, pour une parfaite adaptation sur les fauteuils **Azalea®** et **Clematis®**.

Guide de choix Coussins Visco

Coussin Flo-tech Lite Visco		Portance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids max.	Découpes	Poids
1501107	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	43 cm	40,5 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,2
1501107	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	43 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,2
1501109	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	40,5 cm	40,5 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,1
1501110	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	40,5 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,1
1501111	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	38 cm	40,5 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	0,9
1501112	Invacare® Flo-tech Lite Visco	Ferme	5,5 cm	38 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,1

Coussin Flo-tech Contour Visco		Portance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Profondeur	Découpes	Poids
1501113	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Ferme	9 cm	43 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,7
1501114	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Ferme	9 cm	45,5 cm	40,5 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,7
1501115	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Ferme	9 cm	45,5 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,7
1501116	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Ferme	9 cm	48 cm	40,5 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,7
1501117	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Ferme	9 cm	48 cm	43 cm	100 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,9
1501118	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Très Ferme	9 cm	50,5 cm	40,5 cm	125 kg	Toile d'assise Tube de dossier	1,9
1501119	Invacare® Flo-tech Contour Visco	Très Ferme	9 cm	50,5 cm	43 cm	125 kg	Toile d'assise Tube de dossier	2,0

Coussin Flo-tech Contour Visco pour fauteuil de Confort Azalea® et Clematis®		Portance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Profondeur	Découpes	Poids
1500991	Invacare® Flo-tech Contour Visco Coussin pour fauteuil largeur 39 cm	Ferme	9 cm	35,5 cm	53 cm	125 kg	Tube de dossier	1,8
1500992	Invacare® Flo-tech Contour Visco Coussin pour fauteuil largeur 44 cm	Ferme	9 cm	40,5 cm	53 cm	125 kg	Tube de dossier	1,9
1500993	Invacare® Flo-tech Contour Visco Coussin pour fauteuil largeur 49 cm	Ferme	9 cm	45,5 cm	53 cm	125 kg	Tube de dossier	2,2
1500994	Invacare® Flo-tech Contour Visco Coussin pour fauteuil largeur supérieure	Ferme	9 cm	50,5 cm	53 cm	125 kg	Tube de dossier	2,4

Conditions de prise en charge:

Patients assis en fauteuil plus de 10 heures par jour.
Patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué sur une autre échelle validée.

Prescription:

Mr ou Mme X présente un risque d'escarre Y sur l'échelle de Norton (ou autres échelles reconnues: Braden ou Waterloo).
Son état nécessite la délivrance d'un coussin en mousse viscoélastique **Flo-tech Lite Visco**, Invacare®, code: 1223452.
Son état nécessite la délivrance d'un coussin en mousse viscoélastique **Flo-tech Contour Visco**, Invacare®, code: 1243510.

Renouvellement tous les 3 ans.

Couleur



Dartex Noir

Garantie: 2 ans

Normes:

Housse et mousse: EN 597 parties 1 et 2,
BS 5852: 1982 Crib 5
Housse: BS 7175: 1989 Crib 5

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).

Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.



INVACARE® POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch · 37230 Fondettes France
Tel. : +33 247 62 64 66 · Fax : +33 247 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com · www.invacare.fr

