


[Accueil](#)
[Syst'am](#)
[Produits](#)
[Contact](#)
[News](#)

## ● Polymulti®

### Indications

• Risque d'escarre FAIBLE à MOYEN selon grille d'évaluation validée.

### Les "PLUS" produit

- **Indépendance et mobilité des plots** : le matelas s'adapte à la morphologie du patient, et réduit de façon efficace les effets de cisaillements.
- **Canaux d'aération** entre les plots : permettent la circulation de l'air et donc la ventilation du support, pour une diminution de l'effet de macération.
- **Un matelas moulé** (≠ découpé) : pour une mousse plus souple et plus résistante aux agressions extérieures.
- **Une surface de plots plus importante** : pour une surface de contact entre le patient et le support plus importante, ce qui permet de mieux répartir les pressions.
- **Un matelas MULTIPORTANCES** pour un transfert des pressions des zones à risque élevé vers les zones à risque moindre.

### Specifications

Modèle : POLYMULTI®  
Référence SYST'AM :  
P141M & P143M

Classe LPP : 1A  
Renouvellement : 1 an

Code LPP : 1285111 (F)

Taille /Poids max patient  
- 90 x 200 cm/120kg

### Le principe de Multiportance

#### Une diminution de pressions Max. (e

**Zones de faible portance**  
une meilleure prévention  
à risque (sacrum, talons, .

**Zones de portance élevée**  
zones du corps à plus fait  
d'escarre.

#### SIMPLE A UTI

Seulement 3 configuratic  
les tailles de pat




### Protections Matelas ...




Drap housse ou housse intégrale Polymaille®. Anallergique et traitée SANITIZED, hyper-respirant et totalement imperméable. Classe feu M1



Alèse ou drap housse Polyfilm® (film PU). Anallergique, hyper-extensible et totalement imperméable. Classe feu M4

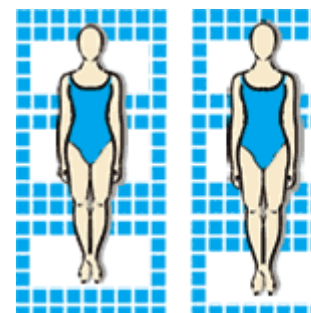

## La prescription

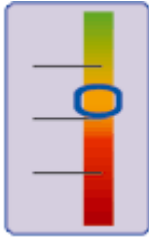

### - Conditions de prise en charge :

Patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué s une autre échelle validée. Patients atteints de lésions médullaires.

### - A faire figurer dans l'ordonnance :

Mr ou Mme X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un : Matela Gaufrier POLYMULTI® P141M SYST'AM - classe 1A.



### SYSTEM

ZAE route de Casseneuil - Le Lédât - 47300 Villeneuve sur Lot - France

Tel.: 05 53 40 23 50 - Fax 05 53 40 50 40

[commercial@system.com](mailto:commercial@system.com)